

【vol.125の主な内容】

新製品

広範囲をカバーした分子量マーカー【Wide-Range DNA Ladder (50-10,000 bp) Ver.2】

耳より

電気泳動装置【Mupid®シリーズ】

TGCAセミナーin大阪「NGS革新と空間解析の未来～最新情報&個別相談会～」のご案内

キャンペーン

ウインターキャンペーンのおススメ製品【TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR】

ウインターキャンペーン&無料カスタムプロトコール作成【MagnaPure 32 Plus】

タカラバイオウインターキャンペーン
2025MAX
50%
OFF




2025.11.25 ▶ 2026.3.31

おススメ製品のご紹介

インターカレーター法用リアルタイムPCR試薬

TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR

他社キットに比べ非特異的増幅を抑制し、高いS/N比を実現。高精度のリアルタイムPCRを可能に！

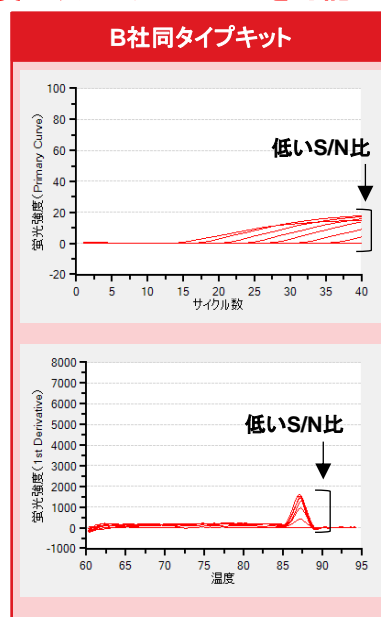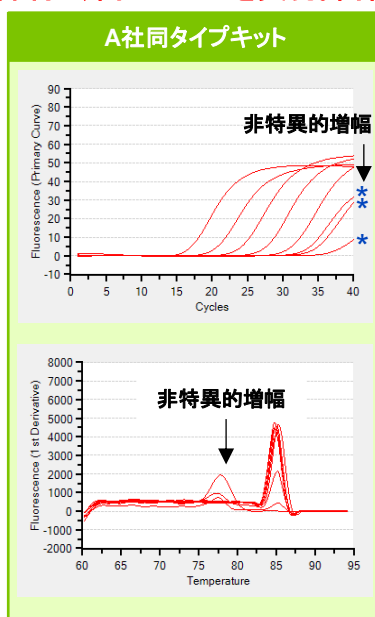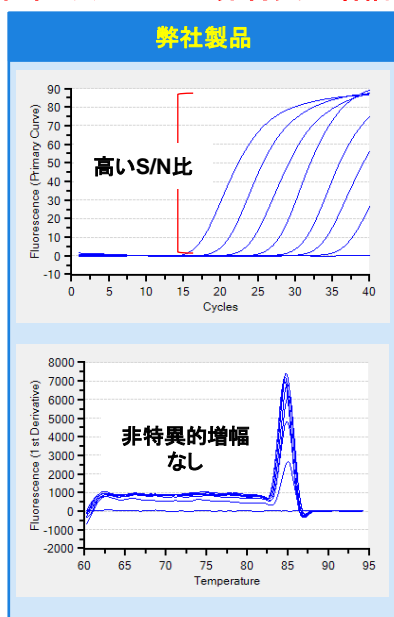

(弊社比較データ)

キャンペーン限定の超お得な「D包装」もご用意しています。ぜひこの機会をご利用ください！

製品名	容量 (25 µl反応系)	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
TB Green® Premix Ex Taq™ II FAST qPCR	80回	RR830S	¥10,000	¥8,000
	400回	RR830A	¥49,000	¥39,200
	800回	RR830B	¥93,000	¥74,400
	3,200回	RR830D	—	¥200,000

※表示価格はすべて税別です。

★ 新製品 ★ 広範囲をカバーした分子量マーカーがバージョンアップ!

Wide-Range DNA Ladder (50-10,000 bp) Ver.2

- ✓ 50～10,000 bpの16種のフラグメントから構成されるDNAサイズマーカー
- ✓ 既存製品よりも各バンドの視認性が高いバージョンアップ製品
- ✓ あらかじめ色素が含まれているため、アガロースゲルに直接ロード可能




既存製品からの改良点

視認性 バンド濃度を改良することで、視認性を向上しました。
500 bp、1,000 bp、2,000 bp、4,000 bpは、より明るく見える※よう設計しています。
また、ロット間誤差はほとんどありません。

※：下記【使用例】に記載の試薬で染色した場合

泳動像

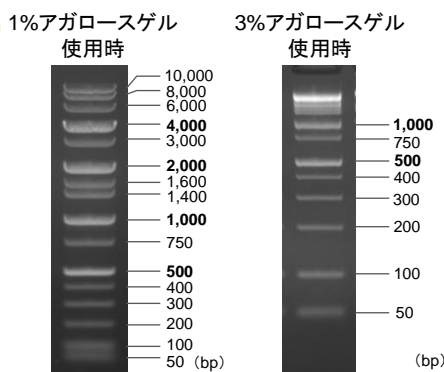

【使用例】

Agarose L03「TAKARA」(製品コード 5003)を用いて作成した1%および3%アガロースゲルに、本製品を5 μlロードして電気泳動を行い、電気泳動後のゲルをEtBrまたはSYBR Green I Nucleic Acid Gel Stain (製品コード 5760A/5761A)で染色した。

- ✓ 1%アガロースゲルを使用した場合、50 bp～10,000 bpを幅広く確認することができる。(図左)
- ✓ 3%アガロースゲルを使用した場合、低分子側(50 bp～1,000 bp)の分離が良くなる。(図右)

★ 実施中のウインターキャンペーンにて**25%OFF**

製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
Wide-Range DNA Ladder (50-10,000 bp) Ver.2 NEW	500 μl	3418A	¥25,000	¥18,750

★ PCR産物確認の電気泳動におすすめ ★

Mupid® 電気泳動装置

Mupid®-One

タイマー機能、マルチピペット対応、7種電圧切換を搭載し、耐熱ゲルメーカーを標準付属したCE準拠のMupid最上位モデルです。



Mupid®-exU

タイマー機能、マルチピペット対応、UV透過槽を搭載し、7種電圧切換で安定性を高めた多機能モデルです。



Mupid®-2plus

Mupid-2の性能を継承し、使いやすさと安全性をさらに高めたサブマリン型スタンダード電気泳動装置です。



Mupid®-2x

Mupidシリーズ下取り買換え専用機です。Mupid-2plusパワーサプライ(¥20,420) + Mupid-2plus泳動槽および蓋(¥24,080)で構成されています。(ゲルメーカーセットは含まれておりません)

➡下取り買換えの詳細はウェブサイトをご覧ください。

Mupid 下取り

検索

製品名	概要	容量	製品コード	価格
Mupid®-One	最上位機種	一式	O1-01	¥71,000
Mupid®-exU	UV透過泳動槽採用	一式	EXU-1	¥65,000
Mupid®-2plus	スタンダードモデル	一式	M-2P	¥45,000
Mupid®-2x	下取り買換え専用	一式	M-2X	¥28,000



こちらからもご確認いただけます

★ 本製品は株式会社ムーピッドの製品です。

★ ウインターキャンペーン & 無料カスタムプロトコール作成 ★

中規模スケールに最適な自動核酸精製装置

MagnaPure 32 Plus

ウインターキャンペーン実施中

キャンペーン期間：～ 2026年3月31日(火)まで

23%
OFF

- ✓ 迅速かつ再現性の高いDNA/RNA磁性ビーズ精製
- ✓ 最大32サンプルを同時処理
- ✓ マッハライ・ナーゲル社検証済みの自動化プロトコールを搭載

コンパクトなサイズ

32サンプルの処理能力がありながら、どんな実験台にもフィットするコンパクトなサイズ

検証済みの自動化プロトコールを搭載

マッハライ・ナーゲル社のNucleoMag®キットで検証済みの自動化プロトコールを多数搭載

直感的な操作

制御PC不要で、本体に内蔵されたカラータッチパネル上で簡単に操作が可能

クロスコンタミネーションを低減

本体に内蔵のUVランプで、細菌、ウイルス、および浮遊ゲノムDNA汚染物質などを効果的に除去

23%OFF


製品名	容量	製品コード	通常価格	キャンペーン価格
MagnaPure 32 Plus	一式	747010	¥2,900,000	¥2,220,000

先着3名限定！


無料カスタムプロトコール特典

本装置はオープンシステムのため、既存プロトコールのパラメーター変更に加え、新規のカスタムプロトコールを自由に作成可能です。実験内容に合わせた最適なワークフローを柔軟に構築できます。

さらに、ウインターキャンペーン期間中にご購入いただいた方のうち、**先着3名様にカスタムプロトコールを無料作成**※いたします。

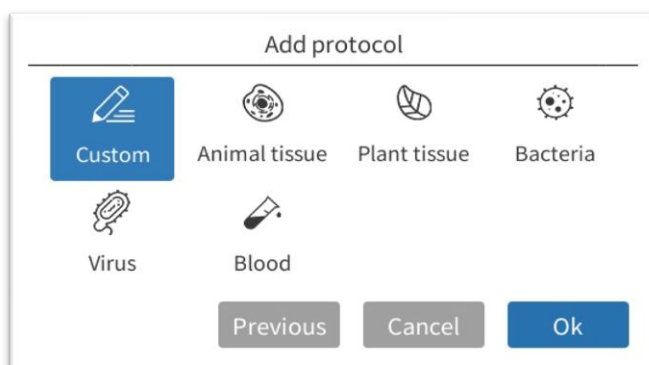

プロトコールはゼロから作成することも、サンプル別の雛形を元に作成することも可能

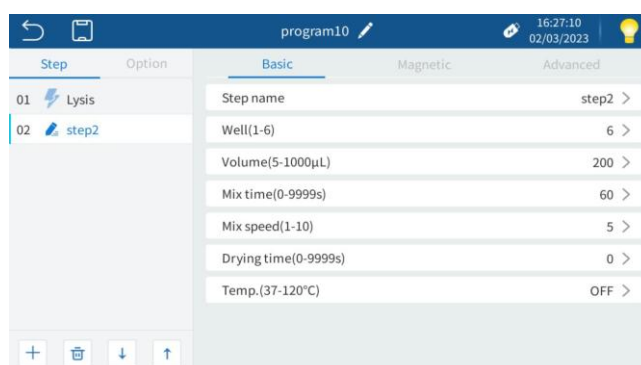

液量、混合時間や混合スピード、乾燥時間や加温条件を変更可能

※：ご注文時にお問い合わせください。

なお、試料条件や装置仕様により、ご希望のプロトコールを作成できない場合がございます。予めご了承ください。

★ 本製品はマッハライ・ナーゲル社の製品です。詳しくは弊社ウェブサイトの製品ページをご確認ください。

TGCAプレミアムセミナー in大阪

NGS革新と空間解析の未来 ～最新情報＆個別相談会～

【日時】2026年2月13日（金） 13:30～17:00（受付開始 13:00）

※開催時間は変更となる場合がございます。

参加費無料

【会場】ライフサイエンスハブウエスト 御堂筋三井ビルディング4階 A+B会議室（大阪）

【セミナー概要】

タカラバイオは分子生物学試薬からゲノム解析サービスまで、ライフサイエンス研究を支えるソリューションを提供しています。本セミナーではNGSと急速に注目を集める空間オミクス解析の最新技術を一挙にご紹介します。

セミナー演題

NGS全般

進化した現代NGSの到達点

▷ これまでの次世代シーケンスの変遷を振り返り、タカラバイオのNGS解析についてご紹介

NGS試薬

微量サンプルにも負けない！ SMART-Seqおすすめ製品3選

▷ 微量サンプルからでも高品質なライブラリー調製を可能にする各製品の特長をご紹介

NGS受託

NGSを用いた遺伝子解析受託サービスのご紹介

▷ RNA-Seq解析、シングルセル解析など各種NGS受託サービスをご紹介。
年度内納品に対応可能な解析もございます！

一本鎖DNA解析

難サンプルからのNGSライブラリー調製を可能とする一本鎖DNAライゲーション技術

▷ 一本鎖DNAライゲーション技術およびこれを活用したssDNA-Seq Kitをご紹介

空間解析

シングルセルシステムを利用した空間解析への新しいアプローチ

▷ Trekker技術を用いた空間解析の原理やデータ例などをご紹介

カスタム製品

カスタム・OEMサービスのご紹介 ～研究・製品開発を支える柔軟なソリューション～

▷ RNAワクチンなど核酸医薬分野のモダリティにも役立つ製品についてご紹介

セミナー後には個別相談会を実施します！ 個別に実験のお悩みや、ご相談を受け付けます。
さらに参加特典として、タカラバイオ試薬・受託サービスの大幅ディスカウントクーポンをプレゼント！

セミナー情報・お申込みはこちら▶

<https://seminar.takara-bio.co.jp/campaign/89247/apply>



セミナーに関するお問い合わせ先

タカラバイオ株式会社 TGCAセミナー担当

E-mail: bio-tgca@takara-bio.co.jp

・本パンフレットで紹介した製品はすべて研究用として販売しております。ヒト、動物への医療、臨床診断用には使用しないようご注意ください。また、食品、化粧品、家庭用品等として使用しないでください。
・タカラバイオの承認を得ずに製品の再販・譲渡、再販・譲渡のための改変、商用製品の製造に使用することは禁止されています。
・ライセンスなどに関する最新の情報は弊社ウェブサイトをご覧ください。
・本パンフレットに記載されている会社名および商品名などは、各社の商号、または登録済みもしくは未登録の商標であり、これらは各所有者に帰属します。
・本パンフレット記載の価格は2026年2月1日現在の希望小売価格です。価格に消費税は含まれておりません。

2026年1月作成G

タカラバイオ株式会社

営業部（東京） TEL 03-3271-8553 FAX 03-3271-7282

営業部（本社） TEL 077-565-6969 FAX 077-565-6995

テクニカルサポートライン TEL 077-565-6999 FAX 077-565-6995

Website <https://www.takara-bio.co.jp>

公式X @Takara_Bio_JP / https://x.com/Takara_Bio_JP

取扱店